

スピリーバ・スピオルト【レスピマツト】

《各部位の名称・残薬の確認方法》



キャップ

吸入口

ボタン

透明ケース

カウンター



透明ケースを回転させる度にカウンターが進んでいきます。目盛りで正確な残薬数は分かりませんが、透明ケースが回転しなくなるまでは使用する事が出来ます。

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


初回はカートリッジ挿入後、吸入せずに4回噴霧してください。
1週間以上使用しなかった場合も同様に、吸入せずに4回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	透明ケースを180度回転させます。 ボタンを押さないよう横からキャップを空けます。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1回2吸入なのでもう一度①からの操作を繰り返して下さい		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

アドエア【エアゾール】

《各部位の名称》

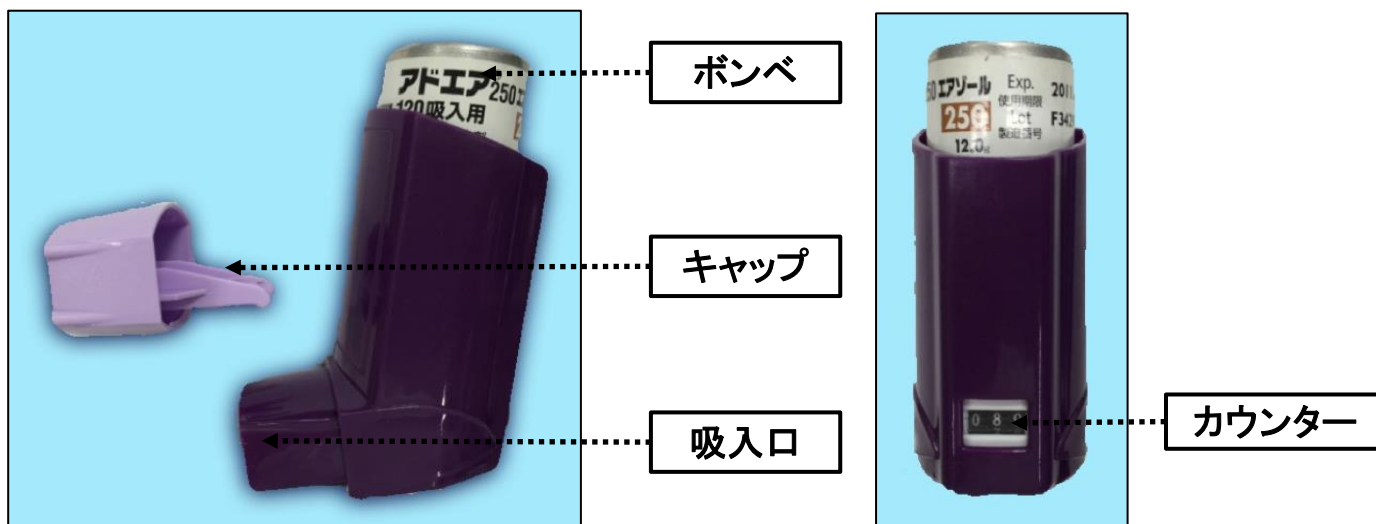

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

オルベスコ【インヘラー】

《各部位の名称・残薬の確認方法》

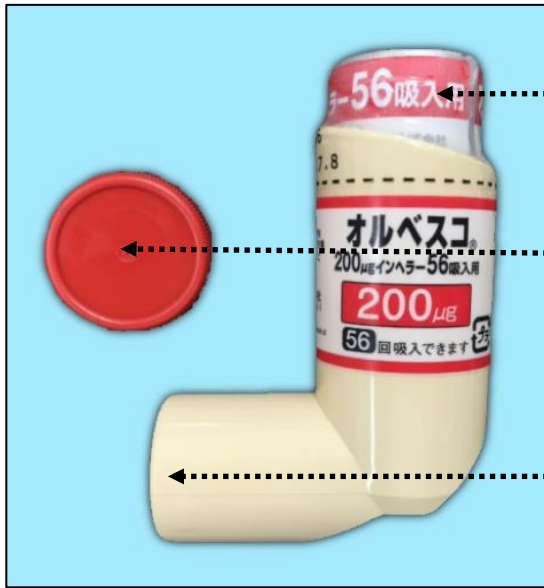

ポンベ

キャップ

吸入口

吸入補助器具を使用する事で
少ない力でも操作が出来ます。

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに3回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

キューバール【エアゾール】

《各部位の名称》

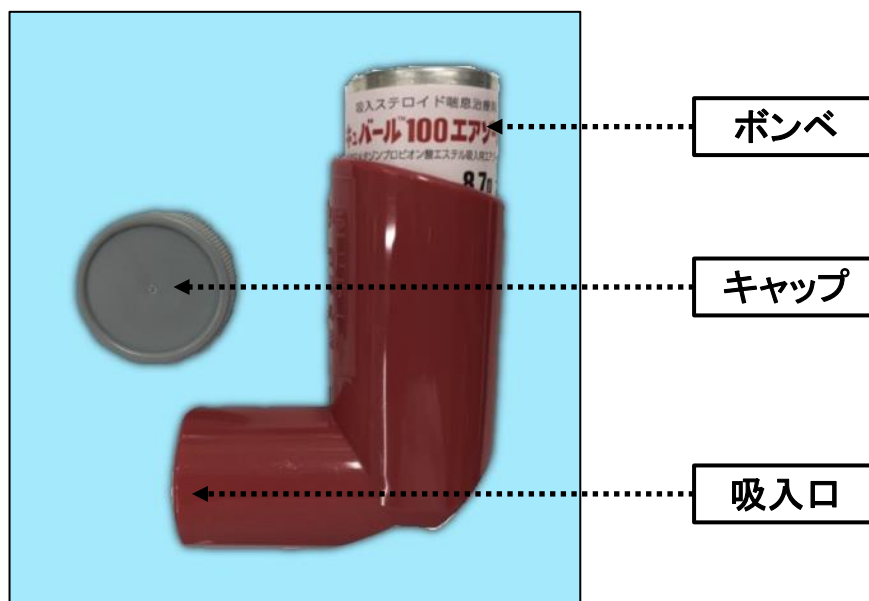

ポンベ

キャップ

吸入口

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

サルタノール【インヘラー】

《各部位の名称》

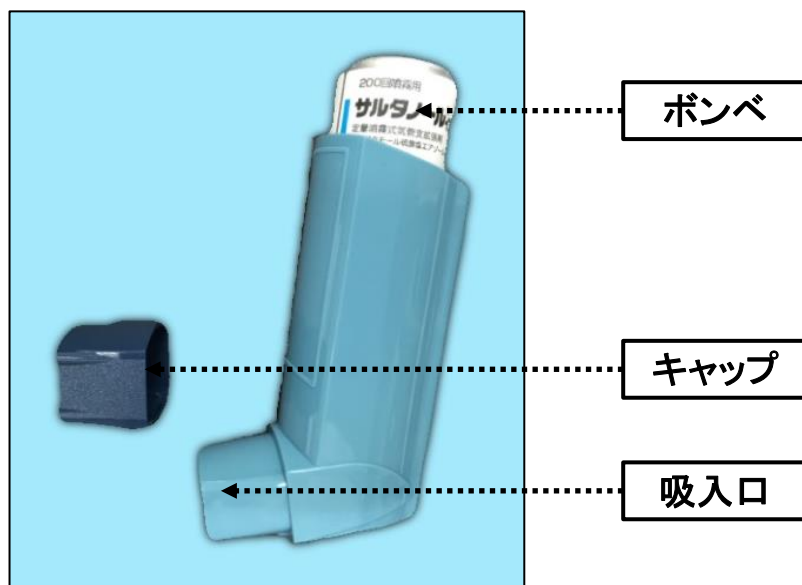

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

テルシガン【エロゾル】

《各部位の名称》

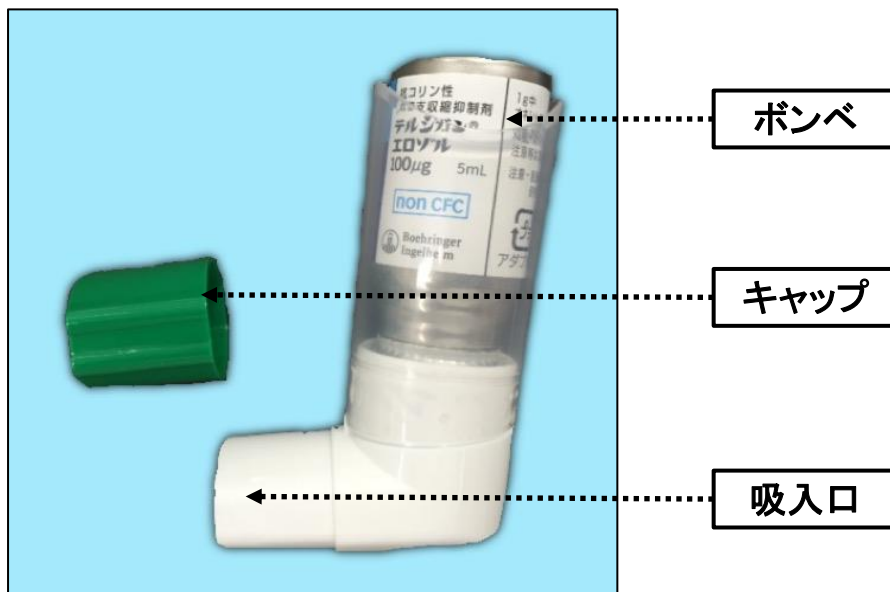

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

《吸入手順》

- | | | |
|-----------------|------|---|
| ① | 薬の準備 | 吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 |
| ② | 息吐き | 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。 |
| ③ | 吸入 | 吸入口を歯でくわえます。
ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。 |
| ④ | 息止め | 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。 |
| ※1度に複数回吸入時は①に戻る | | |
| ⑤ | 後片付け | キャップを閉めます。 |
| ⑥ | うがい | 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。 |

フルタイド【エアゾール】

《各部位の名称》

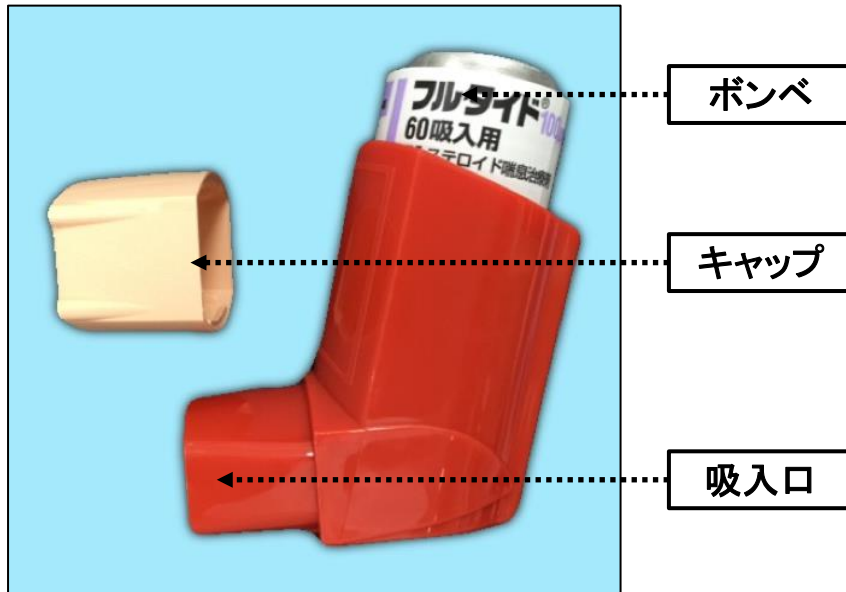

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

フルティフォームエアゾール

《各部位の名称・残薬の確認方法》

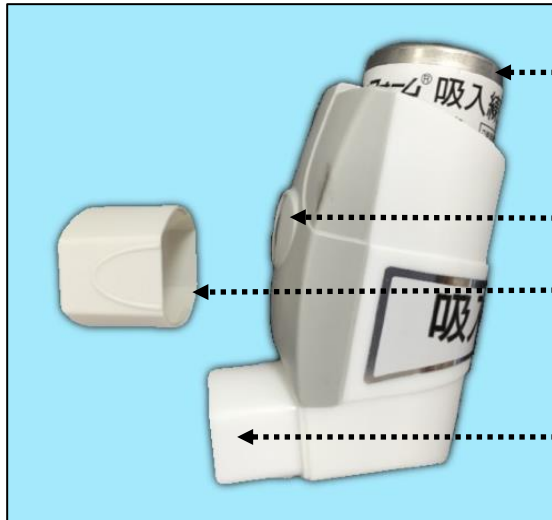

- ボンベ
- カウンター
- キャップ
- 吸入口

吸入補助器具(フルプッシュ)を使用する事で少ない力でも操作が出来ます

フルプッシュ装着時



カウンターの色が緑⇒黄で残り40噴霧、黄⇒赤で残り20噴霧程になります。

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

《吸入手順》

- | | | |
|-----------------|------|---|
| ① | 薬の準備 | 吸入口からキャップを外します。
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 |
| ② | 息吐き | 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。 |
| ③ | 吸入 | 吸入口を歯でくわえます。
ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。 |
| ④ | 息止め | 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。 |
| ※1度に複数回吸入時は①に戻る | | |
| ⑤ | 後片付け | キャップを閉めます。 |
| ⑥ | うがい | 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。 |

ベロテック【エロゾル】

《各部位の名称》

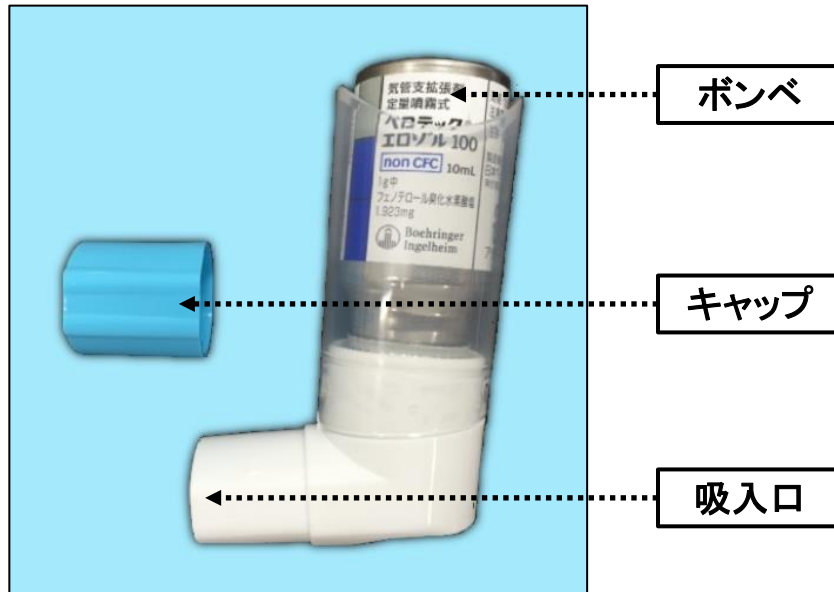

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

メプチン【エアー】・メプチンキッド【エアー】

《各部位の名称》

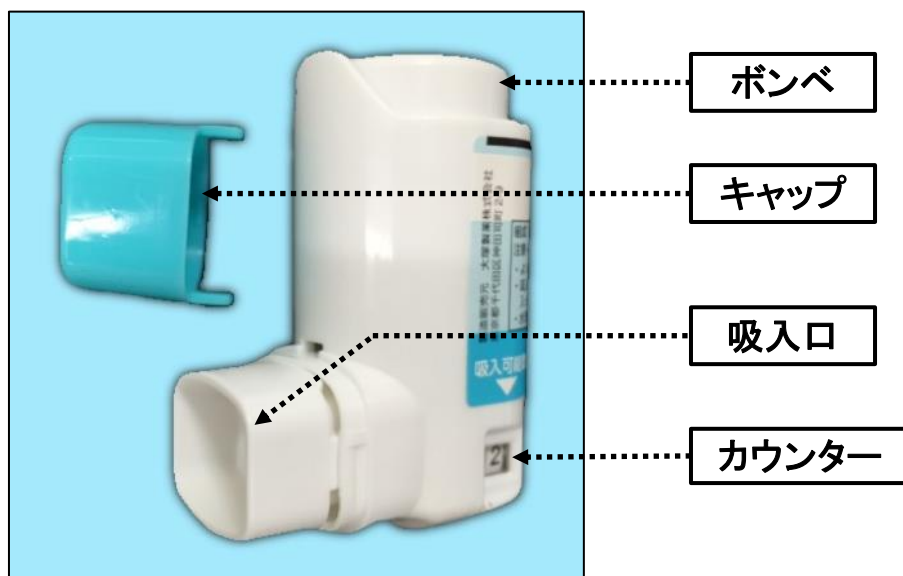

《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。